

オムロン 音波式電動歯ブラシ

HT-B210/ HT-B211  
HT-B212/ HT-B213  
HT-B906

## 取扱説明書



■このたびは、オムロン製品をお買い上げいただきましてありがとうございました。

■安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ず参照してください。

■本書は、いつもお手元においてご使用ください。

■本書は品質保証書を兼ねています。紛失しないように保管してください。

■記載しているイラストはイメージ図です。

All for Healthcare

### 保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きにしたがった正常な使用状態で、お買い上げ後1年以内に故障した場合には無償修理または交換いたします。
- 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、オムロンお客様サービスセンターにご連絡ください。
- 無償保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
  - 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
  - お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
  - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。
  - 品質保証書の提示がない場合。
  - 品質保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - 消耗部品。
  - 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
  - その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障および損傷。
- 品質保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 品質保証書は本規定に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証を約束するものではありません。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 補修用部品は製造打ち切り後、最低5年間保有しています。

品質保証書	
このたびは、オムロン製品をお買い求めいただき、ありがとうございました。製品は厳重な検査をおこない、高品質を確保しております。しかし、通常のご使用において、万一不具合が発生したときは、保証規定により、お買い上げ後1年間は無償修理または交換いたします。 ※製品の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。※以下につきましては、必ず販売店にて、記入捺印していただきます。 This warranty is valid only in Japan.	
販売名 オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B210/HT-B-211/HT-B212/HT-B213/HT-B906	お買い上げ店名
ご芳名	住所
ご住所	TEL ( )
TEL ( )	お買い上げ年月日 年 月 日
発売元 <b>オムロンヘルスケア株式会社</b> <small>〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地</small>	

製品のお問い合わせ、別売品や消耗品のご注文、修理のご依頼は	
オムロンヘルスケア お客様サポート http://www.healthcare.omron.co.jp/support/	消耗品・別売品のご注文は http://store.healthcare.omron.co.jp/
オムロン お客様サービスセンター TEL 0120-30-6606 (通話料無料) FAX 0120-10-1625 (通信料無料) 受付時間 9:00~19:00 (祝日を除く月~金) 〒515-8503 三重県松阪市久保町1855-370 ※都合により、お休みや受付時間の変更をさせていただきます場合があります。	

9307773-8D

OMRON

# 1 安全上のご注意

お使いになる前に必ず参照してください。

- ここに示した内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と意味は次のようになっています。

警告、注意について	
<b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示します。
<b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容を示します。

\*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

図記号の例	
●記号は強制(必ず守る)を示します。(左図は必ず守る)	⊘記号は禁止(してはいけない)を示します。(左図は“禁止”)

## 警告

次の方は使用しないでください。または使用前に歯科医にご相談ください。

■口内の感覚が敏感な方 ■口腔または歯周の手術直後や治療中の方 ■口腔内に気になる症状(治療中の歯、不安定な入れ歯など)のある方 ■歯茎からの出血が続く、または大量の出血がある方

・傷口の悪化や、けがの原因になります。

電池/ブラシは乳幼児の手の届かないところに置いてください。お子様だけでのご使用は避けてください。万一、電池/ブラシを飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

・乳幼児、お子様のけがの原因になります。

ブラシは複数人で共用しないでください。

・病原菌に感染する原因になります。

植込み型医療機器(心臓ペースメーカーなど)の装着部位から10cm以内に近づけないでください。

・本体に内蔵されている磁石の影響により、植込み型医療機器の誤動作をまねく恐れがあります。

浴室内などの水のかかる場所で使用しないでください。

・感電や故障の原因になります。

## 注意

電池の⊕⊖極を正しく入れてください。

・発熱や液漏れ、破裂などにより、本体の破損やけがの原因になります。

指定の電池を使用し、違う種類の乾電池や、古い乾電池と新しい乾電池を混ぜて使用しないでください。

・発熱や液漏れ、破裂などにより、本体の破損やけがの原因になります。

長期間(3カ月以上)使用しないときは、電池を取り外してください。また、使用済みの電池はすぐに取り外し、新しいものと交換してください。

・液漏れなどにより、本体の破損やけがの原因になります。

歯や歯茎にブラシを強く押しあてたり、毛先以外のプラスチック部分をあてたりしないでください。また、長時間同じ箇所を磨かないでください。

・歯や歯茎に損傷を与えたり、故障の原因になります。

人以外に使用しないでください。

・事故やトラブルの原因になります。

本体を踏んだり、落としたり、強い衝撃を与えないでください。

・けがや故障の原因になります。

## 注意

自分で意思表示ができない人は使用しないでください。

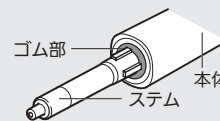
・事故やトラブルの原因になります。

分解や修理・改造をしないでください。


・けがや故障の原因になります。

## お願い

- ・歯みがき以外の目的には、使用しないでください。
- ・歯みがき粉を使用される場合は、研磨剤が入っていない一般的な歯みがき粉を使用してください。ヤ二取り用・美白用などの歯みがき粉は、研磨剤により歯を研磨する作用が大きいため、おすすできません。ご使用の場合は、歯科医にご相談ください。
- ・個人差はありますが、初めてご使用になる際、独特な刺激を感じることがあります。これは音波式電動歯ブラシ特有の音波振動によるものです。
- ・ステムと本体の間にあるゴム部を傷つけたり、ステムに必要以上に力を加えたりしないでください。ゴム部に傷がつくと、本体内部に水が入り、故障の原因となります。



# 2 各部の名前と付属品

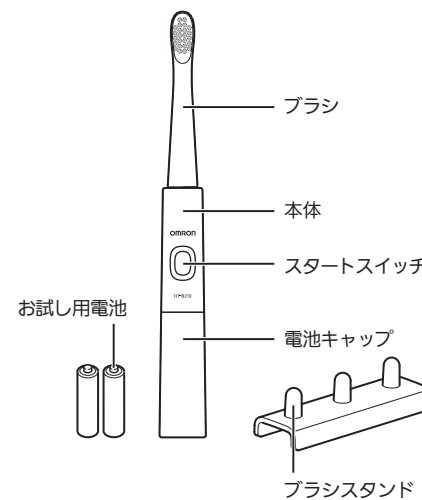


※[HT-B210/HT-B213/HT-B906]には付属しません。

付属品	HT-B210	HT-B211	HT-B212	HT-B213	HT-B906
トリプルクリアブラシ SB-072	1本	1本	1本	1本	1本
極細マイルドブラシ SB-082	—	—	1本	—	—
すき間みがきブラシ SB-092	—	1本	1本	—	—
極細スパイラルブラシ SB-032	—	1本	—	—	—
ブラシスタンド HT-B470-STAND	—	1台	1台	—	—

※お手元の製品型式をご確認ください。製品型式により付属品は異なります。

# 3 電池を入れる

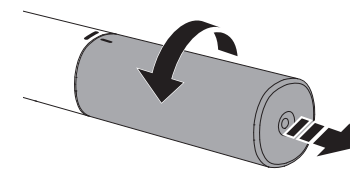
## 1. 電池キャップを左に回して外す



※本体と手が乾いた状態で電池を入れてください。

## 2. 電池を入れる

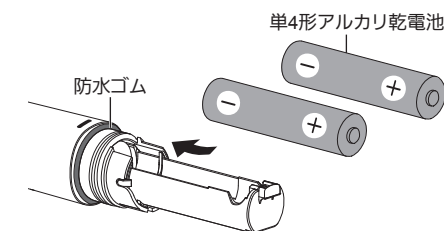電池の⊕⊖を図のように入れてください。




※2個同時に新しい電池(同じ種類のもの)と交換してください。

※単4形アルカリ乾電池以外は使用しないでください。 ※使用済み電池の廃棄方法は、お住まいの市区町村の指導に従ってください。

※防水ゴムを取り外さないでください。防水性が損なわれ水洗いの際に水が本体に浸入し、故障の原因になります。

## 3. 電池キャップを右に回して閉める

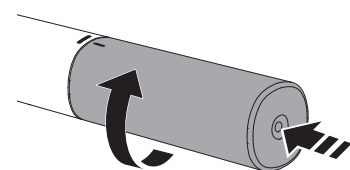本体裏側のマークがTになるところまで回してください。



※電池キャップが回らなくなるまで完全に閉めてください。ゆるんだまま使用すると、水が入り、故障の原因になります。 ※強く回しすぎないようにしてください。無理に回すと破損する場合があります。


## ■連続使用時間について

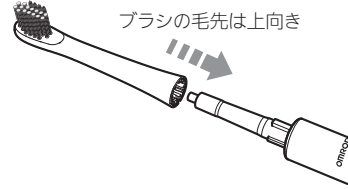単4形アルカリ乾電池2個で約2.5カ月間ご使用になれます。(室温23℃、1回2分、1日2回使用の場合) ※使用する電池の銘柄、使用時間、使用時のブラッシング圧などにより異なりますので、ブラシの振動が弱くなったら、早めに電池を交換してください。 ※付属の電池はお試用です。2.5カ月以内に寿命が切れることがあります。 ※使用推奨時間は1回2分です。

## 4 ブラシの取り付け方


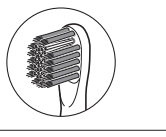
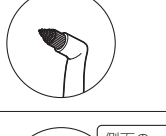
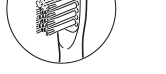
### 1. ブラシを本体に差し込む

ブラシを本体正面に向け、カチッとなるまでまっすぐに差し込みます。



※ブラシは本体に真っすぐ差し込んでください。ななめに差し込んだり、回しながら差し込んだりすると、本体/ブラシが破損する恐れがあります。

### ■替えブラシ（タイプ2）について

トリプルクリアブラシ SB-072	
らせん状の「スパイラル毛」、歯周ポケットに届く「Wメリット毛」、歯の表面を磨く「ひし形毛」の3種類の植毛で歯垢を除去します。しっかり磨きたい方におすすめです。	
極細マイルドブラシ SB-082	
2種類の微細毛が歯面の凹凸や歯のすき間、歯周ポケットの歯垢をやさしく取り除きます。	
すき間みがきブラシ SB-092	
奥歯にも届きやすいL字型で、みがきにくい歯間や歯並びの悪い所の歯垢をかき出します。歯列矯正されている方にもおすすめです。	
極細スパイラルブラシ SB-032	
らせん状の「極細スパイラル毛」の表面の凹凸が、歯の表面に付着したステイン*を効果的にかきとります。*ステイン：歯の表面に付着した着色汚れ	
トリプルクリアブラシコンパクト SB-042	
カタチの異なる3種類の植毛が、効果的に歯垢を除去します。お口の小さな方、奥歯をしっかり磨きたい方におすすめです。	

※ブラシの種類によっては、振動が変化する場合がありますが故障ではありません。

※ブラシは消耗部品です。毛先が開いてきたら交換時期ですので、製品型式をご確認のうえ、別売品をお求めください。

※ご購入の際は必ずタイプをご確認いただき、タイプ2の替えブラシをご利用ください。異なるタイプでは使用できません。

### ■別売品について

別売品をお求めの際は、オムロンお客様サービスセンター（☎0120-30-6606）もしくはオムロンヘルスケアストア <https://store.healthcare.omron.co.jp/> までお買い求めください。

品名	型式	入数
トリプルクリアブラシ	SB-072	2本
極細マイルドブラシ	SB-082	2本
すき間みがきブラシ	SB-092	2本
極細スパイラルブラシ	SB-032	2本
トリプルクリアブラシコンパクト	SB-042	2本

## 5 使い方

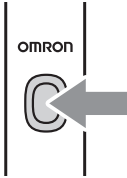
### 1. 口の中にブラシを入れる



※毛先を水で湿らせると効果的です。  
※歯みがき粉を使用される場合は、研磨剤が入っていない一般的な歯みがき粉を少量付けてください。  
※飛び散りを防ぐために、口の中にブラシを入れてからスタートスイッチを押してください。

### 2. スタートスイッチを押す

ブラシが振動します。



※ブラシを歯に軽くあて、横方向に移動させながら磨いてください。

### 3. 磨き終わったら、スタートスイッチを押して電源を切る

※電源を入れてから約3分で自動的に電源が切れます。もう一度電源を入れると、さらに続けて磨くことができます。

## 上手なみがき方

#### ●ブラシのあて方

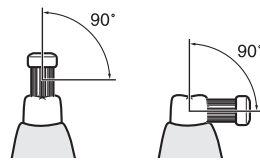
ブラシの毛先が歯や歯茎に触れるように軽くあててください。

#### ●ブラシの動かし方

手磨きのように動かさず、1,2歯ずつ横方向に移動させながら磨いてください。


#### 歯面やかみ合わせ面

歯に対してブラシを90°にあててください。



#### 歯と歯茎の境目

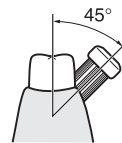毛先が歯茎の溝に入るよう45°に傾けてください。




#### 歯面の裏や歯並びの悪いところ

ブラシをタテにあて、歯面に沿って1本ずつ磨いてください。



## 6 使い終わったら
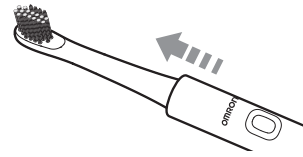
### 1. 本体からブラシを真っすぐ引いて外す




### 2. 外したブラシを水で洗う

※流水で歯みがき粉を落とし、よく振って水気を切ってください。

### 3. 本体を水で洗う

※電池キャップがゆるんだ状態、または外れた状態で洗わないでください。

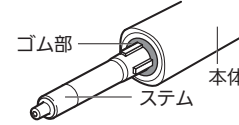※ステムと本体の間にあるゴム部を傷つけたり、ステムに必要以上に力を加えたりしないでください。ゴム部に傷がつくと、本体内部に水が入り、故障の原因となります。



### 4. 水分を拭き取り保管する

※本体は乾いたやわらかい布で拭いてください。  
※本体は平らな風通しのよいところに置いてください。

## 7 お手入れと保管

### ■お手入れについて

- いつも清潔にしてお使いください。
- 歯みがき粉が付着した状態で放置すると、本体表面が劣化する場合があります。
- 汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- 汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤をしみこませた布をかたく絞って拭き取り、やわらかい布でから拭きしてください。

### ＜お手入れのお願い＞

- 本体内部に水などが入らないようにしてください。
- 水をためてつけ洗いや、水の中に放置したりしないでください。
- ブラシ、本体をアルコールに浸したり、熱湯（40℃を超える湯）で消毒したりしないでください。
- 消毒液をつけた布で拭かないでください。
- 汚れを落とすとき、ベンジン、シンナー、エタノールなどを使用しないでください。



### ■保管について

- 次のようなところに保管しないでください。  
水のかかるところ／高温・多湿、直射日光、ほこり、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ／傾斜、振動、衝撃のあるところ／化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ／火気の近く
- 乳幼児の手の届かないところに置いてください。
- 長期間（3カ月以上）ご使用にならない場合は、電池を取り出して保管してください。

※上記の注意事項、その他の正しい使用方法をお守りいただけない場合は、品質に責任を負いかねます。

## 8 おかしいな?と思ったら

こんなとき	原因	対処のしかた
ブラシの動作がガタつく	ブラシが本体に正しく取り付けられていない。	ブラシを正しく取り付けてください。（☞4ブラシの取り付け方）
使用可能時間が短い		
ブラシの振動が弱い	電池の残量が減っている。	電池を交換してください。（☞3電池を入れる）
動かない	電池の向きが間違っている。	電池を正しく入れ直してください。（☞3電池を入れる）
本体があたたかい	製品の特性上少しあたたかくなる。	故障ではありません。また本製品の寿命にも影響ありません。
歯茎から出血する、振動が強く歯茎が痛い	電動歯ブラシを使用し始めてから数日間は若干歯茎から出血することがあります。	通常、その場合の出血は数日で止まります。出血が2週間以上続いた場合は使用を中止し、歯科医の診断を受けてください。
	使用ブラシが合っていない。	やさしくブラッシングができる極細マイルドブラシ（SB-082）のご使用をお勧めします。

## 9 仕様

販売名	オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B210/HT-B211/HT-B212/HT-B213/HT-B906	
電源	単4形アルカリ乾電池2個（DC3.0V）	
消費電力	約0.75W	
電池寿命	約2.5カ月間（単4形アルカリ乾電池2個で室温23℃、1回2分、1日2回使用の場合）	
振動数	約20,000回/分	
使用環境条件	+5～+35℃/30～85%RH	
保管環境条件	-20～+60℃/10～95%RH	
質量	本体：約60g（ブラシ取付状態・乾電池含む）	
寸法	本体：全長約200mm（ブラシ含む）×幅約21.8mm×奥行き約21.8mm ブラジスタンド：幅約96mm×高さ約27mm×奥行き約30mm	
付属品	HT-B210	トリプルクリアブラシ（1本）、お試用電池（単4形アルカリ乾電池2個）、取扱説明書（品質保証書付き）
	HT-B211	極細スパイラルブラシ（1本）、トリプルクリアブラシ（1本）、すき間みがきブラシ（1本）、ブラジスタンド（1台）、お試用電池（単4形アルカリ乾電池2個）、取扱説明書（品質保証書付き）
	HT-B212	極細マイルドブラシ（1本）、トリプルクリアブラシ（1本）、すき間みがきブラシ（1本）、ブラジスタンド（1台）、お試用電池（単4形アルカリ乾電池2個）、取扱説明書（品質保証書付き）
	HT-B213	トリプルクリアブラシ（1本）、お試用電池（単4形アルカリ乾電池2個）、取扱説明書（品質保証書付き）
	HT-B906	トリプルクリアブラシ（1本）、お試用電池（単4形アルカリ乾電池2個）、取扱説明書（品質保証書付き）