


オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B306

Mediclean メディクリーン

取扱説明書

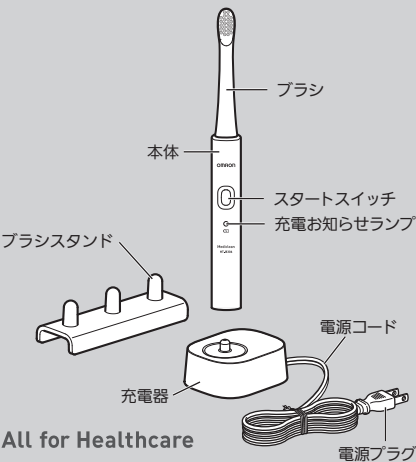

■このたびは、オムロン商品をお買い上げいただきましてありがとうございました。

■安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

■本書はいつもお手元においてご使用ください。

■本書は品質保証書を兼ねています。紛失しないように保管してください。

■記載しているイラストはイメージ図です。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意事項にしたがった正常な使用状態で、お買い上げ後1年以内に故障した場合には無償修理または交換いたします。
- 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、オムロンお客様サービスセンターにご連絡ください。
- 無償保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。
 - (ニ) 品質保証書の提示がない場合。
 - (ホ) 品質保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - (ヘ) 消耗部品
 - (ト) 故障の原因が本品以外に起因する場合。
 - (チ) その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障および損傷。
- 品質保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 品質保証書は本規定に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 補修用部品は製造打ち切り後、最低5年間保有しています。

品質保証書

このたびは、オムロン商品をお買い求めいただきありがとうございました。商品は厳重な検査をおこない高品質を確保しております。しかし通常のご使用において万が一、不具合が発生したときは、保証規定によりお買い上げ後、1年間は無償修理または交換いたします。

※商品の保証は、日本国内での使用の場合に限りです。 This warranty is valid only in Japan.

※以下につきましては、必ず販売店にて、記入捺印していただいでください。

販売名 オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B306	お買い上げ店名
ご芳名	住 所
ご住所	TEL ()
TEL ()	お買い上げ年月日 年 月 日

発売元
オムロンヘルスケア株式会社
〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地

オムロン健康商品のお問い合わせは

修理のご用命、別売品・消耗部品の求めも、この電話で承ります。修理には、便利な引き取りサービスをご利用ください。

オムロンお客様サービスセンター ※ダイヤルは正確に

☎ 0120-30-6606 (通話料無料)
FAX 0120-10-1625 (通話料無料)

受付時間
9:00~19:00 月~金(祝日を除く)
都合によりお休みをいただいたり、受付時間帯を変更させていただくことがありますのでご了承ください。

ホームページ <http://www.healthcare.omron.co.jp/>
※通信料はお客様ご負担となります。(別売品・消耗部品は、インターネットでもお求めいただけます。)

4065228-5A

安全上のご注意

お使いになる前に必ずお読みください。

- ここに示した内容は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と意味は次のようになっています。

警告、注意について

- ⚠ **警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示します。
- ⚠ **注意** 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容を示します。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

図記号の例

●記号は強制(必ず守る)を示します。(左図は“必ず守る”)

⊘記号は禁止(してはいけない)を示します。(左図は“禁止”)

警告

次の方は使用しないでください。または使用前に歯科医にご相談ください。

- 口内の感覚が敏感な方
- 口腔または歯周の手術の直後や治療中の方
- 口腔内に気になる症状(治療中の歯、不安定な入れ歯など)のある方
- 歯ぐきからの出血が続く、または大量の出血がある方
- ・傷口を悪化させたり、けがの原因になります。

ブラシは乳幼児の手の届かないところに置いてください。お子様だけでのご使用は避けてください。

・乳幼児、お子様のけがの原因になります。

ブラシは複数の人で共用しないでください。

・病原菌に感染する原因になります。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100-110 V 以外では使用しないでください。

・タコ足配線などにより定格を超えると、火災の原因になります。

傷んだ電源コードや電源プラグは使用しないでください。

・感電やショート、発火の原因になります。

充電器を水洗いしないでください。

・感電の原因になります。

本体は廃棄のとき以外は絶対に分解しないでください。

・けがや故障の原因になります。

本体や充電器は浴室内などの水のかかる場所で使用しないでください。

・感電や故障の原因になります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

・感電やけがの原因になります。

注意

本体を廃棄するときは、取り外した充電電池の⊕⊖端子にセロハンテープやシールなどを貼り付けてください。

・ショートにより、火災の原因になります。

電源プラグのほこりはふき取ってください。

・ほこりに湿気が加わると、感電やショート、発火の原因になります。

電源プラグはしっかり根元まで差し込んでください。

・感電やショート、発火の原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らず、電源プラグを持って抜いてください。

・電源コードの断線やショートにより、火災や感電の原因になります。

電源コードの取り扱いには以下の項目に注意してください。

- 傷つけない ■破損させない ■加工しない ■無理に曲げたり、引っ張らない
- ぬじらない ■使用時は束ねない ■重い物や載せない ■挟み込ませない
- ・感電や火災、故障の原因になります。

1週間以上ご使用にならないときは電源プラグを抜いてください。

・絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

充電器のお手入れの前には、電源プラグを抜いてください。

・感電やけがの原因になります。

注意(つづき)

専用の充電器以外は使用しないでください。

・充電電池が発熱し発火や感電、故障の原因になります。

歯や歯ぐきにブラシを強く押しあてたり、毛先以外のプラスチック部分をあてないでください。また、長時間同じ箇所をみがかないでください。

・歯や歯ぐきに損傷を与えたり、故障の原因になります。

人以外に使用しないでください。

・事故やトラブルの原因になります。

本体や充電器を踏んだり、落としたり、強い衝撃を与えないでください。

・けがや故障の原因になります。

自分で意思表示ができない人は使用しないでください。

・事故やトラブルの原因になります。

充電電池を火の中に入れてください。

・破裂してけがなどの原因になります。

お願い

歯みがき以外の目的には、使用しないでください。

充電器を鉄板など金属板の上で使用しないでください。


・充電効率が落ちたり、消費電流が増加します。

研磨剤が入っていない一般的な歯磨き粉を使用してください。ヤニ取り用・美白用などの歯みがき粉は、研磨剤により歯を研磨する作用が大きいため、歯や歯ぐきを傷める原因になりますのでおすすめできません。ご使用の場合は、歯科医にご相談ください。

個人差はありますが、初めてご使用になる際、独特な刺激を感じる場合があります。これは音波式電動歯ブラシ特有の音波振動によるものです。

ブラシと本体の間にあるゴム部を傷つけないでください。

・内部に水が入り、故障の原因になります。

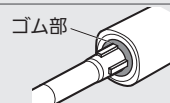

仕様

※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

販売名	オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B306	充電方式	電磁誘導方式
電源電圧	AC100-110 V 50/60 Hz	使用電池	ニッケル水素電池 (Ni-MH 2.4 V)
消費電力	約 1 W (充電時)	充電時間	約 10 時間 (室温 23℃にて)
連続使用時間	約 30 分 (室温 23℃にて満充電後 100 g 負荷時) オートパワーオフ約 3 分 ・充電電池の特性として、充電を繰り返すたびに1回の使用時間は次第に短くなります。満充電しても使用時間が購入後はじめてのご使用時に比べて著しく短くなったら電池の寿命です。 ・電池は交換できません。寿命がきたら電池および商品の廃棄をお願いします。		
モード	クリーンモード：通常の歯みがきに使用するモード		
振動数	クリーンモード：約 25,500 回/分 (無負荷時)		
使用環境温湿度	+5~+35℃、30~85% RH		
保管環境温湿度	-20~+60℃、10~95% RH		
質量	本体：約 46 g (ブラシ含む)、充電器：約 115 g		
外形寸法	本体：全長約 195 (ブラシ含む) × 幅約 18.8 × 奥行き約 18.8 mm 充電器：幅約 51 × 高さ約 35.5 × 奥行き約 63 mm ブラシスタンド：幅約 96 × 高さ約 27 × 奥行き約 30 mm		
電源コードの長さ	約 120 cm		
付属品	トリプルクリアブラシ(1本)、極細マイルドブラシ(1本)、すき間みがきブラシ(1本)、極細スパイラルブラシ(1本)、充電器(1台)、ブラシスタンド(1台)、取扱説明書(品質保証書付き)		

別売品について

ブラシは消耗部品です。毛先が開いてきたら交換時期です。別売品をお求めください。別売品の求めは、オムロンお客様サービスセンター(☎0120-30-6606)までお問い合わせください。

品名	型式	品名	型式
トリプルクリアブラシ (2本)	SB-072	すき間みがきブラシ (2本)	SB-092
極細マイルドブラシ (2本)	SB-082	極細スパイラルブラシ (2本)	SB-032

※本商品に対応するブラシの詳細については、裏面「替えブラシ(タイプ2)について」をご覧ください。

