


オムロン口腔洗浄器エレピック

ELEPIC^{...}

HT-J202

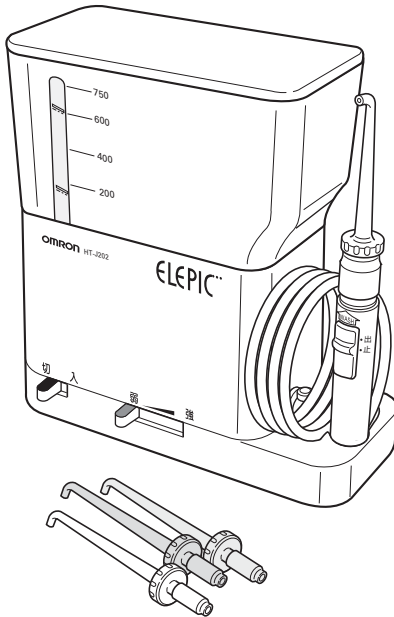

取扱説明書



もくじ	
	安全上のご注意 1
	口腔洗浄器について 5
	各部のなまえ 6
使い方	ご使用前の準備 7
	使い方 9
	お手入れ／保管 12
	おかしいな?と思ったら 13
	仕様／お問い合わせ先 14
	保証規定・品質保証書 裏表紙

- このたびは、オムロン口腔洗浄器をお買い上げいただきましてありがとうございました。
- 安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
- 本書はいつもお手元においてご使用ください。
- 本書は品質保証書を兼ねています。紛失しないように保管してください。

1 安全上のご注意





お使いになる前によくお読みください

- ここに示した警告サインと図記号の例は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と意味は次のようになっています。

警告サイン	内容
 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容を示します。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

図記号の例

	△記号は注意（警告・危険を含む）を示します。 具体的な注意内容は、△の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は“感電注意”を示します。
	⊘記号は禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は“分解禁止”を示します。
	●記号は強制（必ず守ること）を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は“一般的な強制”を示します。
	●記号は強制（必ず守ること）を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は“電源プラグを抜く”を示します。

安全上のご注意 2

警告

口腔または歯周手術を受けて間もない方や現在治療中の方は、本器のご使用を歯科医に相談してください。

- ・刺激により傷口が悪化する原因となります。

本製品の使用により体に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。

- ・事故や体調不良を起こす原因となります。

乳幼児や体の不自由な方が自分で使用する時は、付き添って十分に注意してください。

- ・事故につながる原因となります。

ノズルを目、鼻、耳、のどなどに向けたり、口腔洗浄の目的以外に使用しないでください。

- ・水圧の高い水が出るため、けがの原因となります。

浴室内など水がかかる場所などでは使用しないでください。

- ・感電や故障の原因となります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

- ・感電の原因となります。

本体を水中に落としたり、本体内部に浸水した場合は、本体に触れずに、直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。

- ・火災や感電の原因となります。



3 安全上のご注意

■取り扱いについて

⚠️ 注意

使い始めに歯ぐきから出血することがあります。2週間以上使用されても出血が続く場合、または大量の出血がある場合は、歯科医にご相談ください。

・歯周病以外の病気による出血の原因となります。

ノズルの先端を歯や歯ぐきに接触させないでください。

・水流効果が低下したりノズルが変形する原因となります。

いきなり強い圧力で使わないでください。

・歯ぐきから出血する原因となります。

本製品を口腔洗浄以外の目的で使用しないでください。

・事故につながる原因となります。

本製品の使用について以下のことに気をつけてください。

- (1) 本体を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- (2) 薬品や40℃以上の温水や熱湯等を入れないでください。
- (3) タンクに水のない状態での使用は避けてください。
- (4) 落下の恐れのある不安定な場所、直射日光が当たるところ、暖房器具などの近くに置かないでください。
- (5) タンク内にノズルのつまりの原因になる、ごみ、糸くず等が入らないようにしてください。

・故障の原因となります。

(6) ノズルは奥まで確実に差し込んでください。

・ノズルが飛び出す原因となります。

通常、タンク満水時の使用時間は約2～3分です。
安全のため7分以上の連続使用はしないでください。

・内部モーターの発熱につながる原因となります。





本製品を分解したり内部に触れたりしないでください。故障したと思われるときは、オムロンお客様サービスセンターに修理を依頼してください。(P.14ページ)

・感電やけがをする原因となります。



■電源について

⚠️ 注意

<p>お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・感電の原因となります。 	
<p>電源プラグを抜くときは、コードを持たずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・火災や感電の原因となります。 	
<p>必ず交流100Vでご使用ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・火災、故障、事故につながる原因となります。 	
<p>長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。 	

5 口腔洗浄器について

特長 口腔衛生を目的としています。

方法 ノズルから噴き出る脈動ジェット水流によって、食べカスを洗い流す方法です。


効果

- ・ ジェット水流が歯のすき間や、歯と歯ぐきの間に残った食べカスや汚れを取り除きます。
- ・ 歯をきれいにすると同時に、歯ぐきに心地よい刺激をあたえます。
- ・ 口中の食べカスを洗い流し、自分では気づきにくい口臭を抑えます。



各部のなまえ 6

商品内容を確認してください。

1 本体

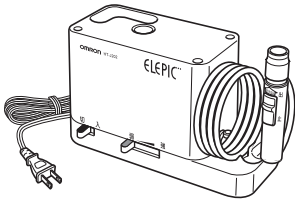


2 タンク(フタ付) 3 ノズル(4本)

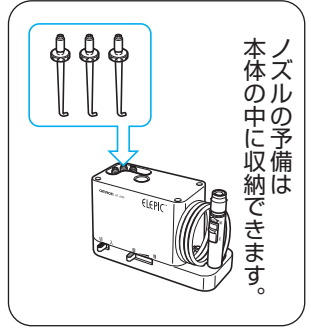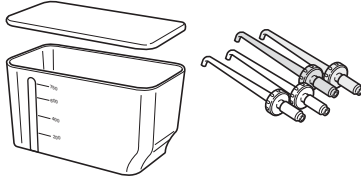

各部のなまえ


各部のなまえ

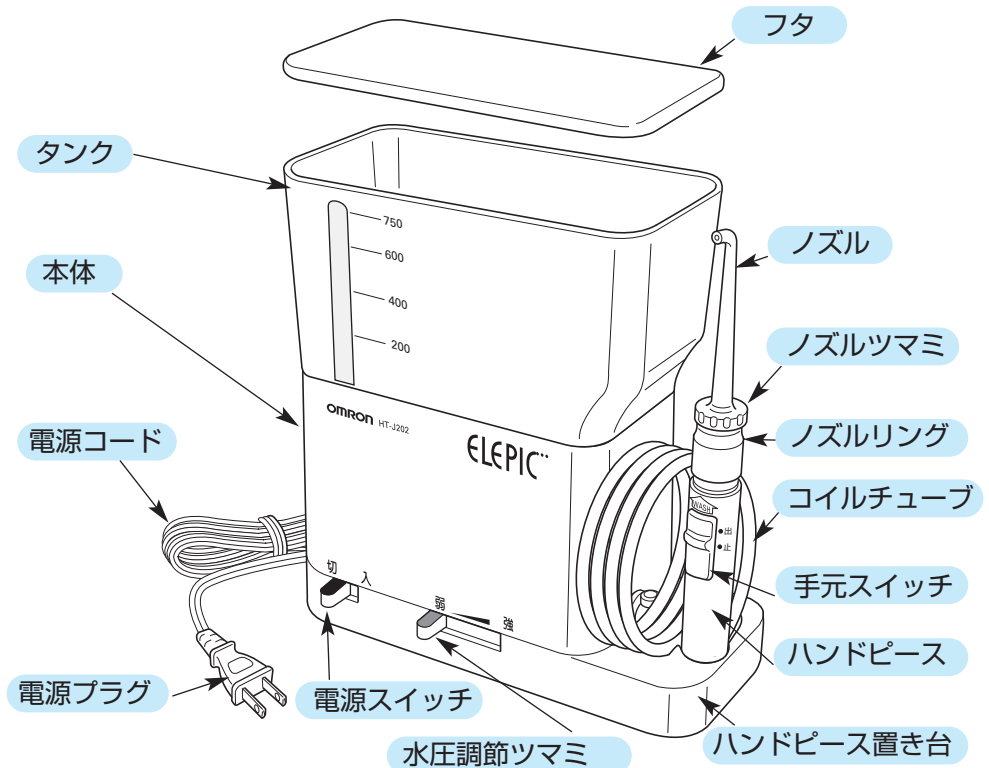


7

ご使用前の準備

- ① ハンドピースを取り、リングを矢印の方向に下げ、ノズルをハンドピースに取り付けます。

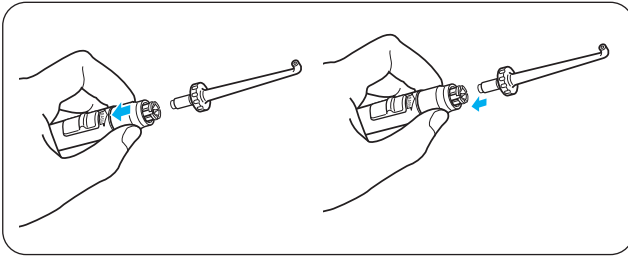

- ② 一度ハンドピースを指定の場所に戻します。

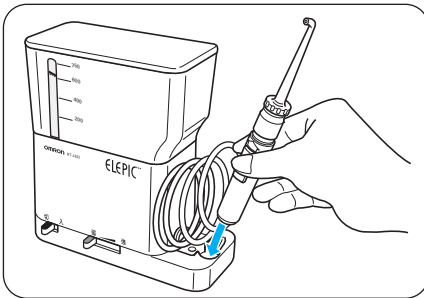

- ⑥ 電源プラグをコンセントにしっかり差し込みます。

食塩水を使う場合

(1)別の容器に水、またはぬるま湯(40℃以下)を入れて食塩を溶かしてください。

食塩量のめやす

水、またはぬるま湯(40℃以下) : コップ1杯(約200mL)
食塩 : 小さじ1杯(約9グラム)

(2)できあがった食塩水のうわずみをタンクに移してください。

(3)使用後は残った食塩水(水歯磨き等)の溶液を全部捨ててください。


タンクに水を入れ、ノズルから1~2分水を噴出させます。

本体に残留している溶液を洗い出すことができます。

ご使用前の準備 8


③ タンクに水、またはぬるま湯（40℃以下）を入れます。

👉 **お願い** タンク底部にある十字形のミゾにパッキンが確実にハマっていることを確認してください。

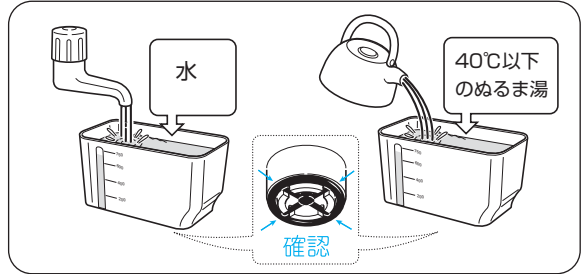


* 水歯磨き（マウスウォッシュ）・食塩水も使用できます。

④ 本体にタンクを取り付けます。

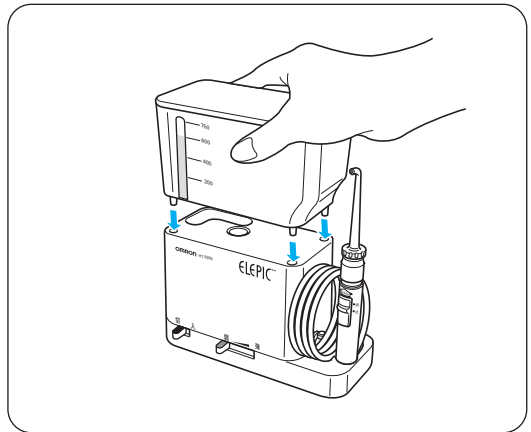

⑤ 電源スイッチの位置をご確認ください。

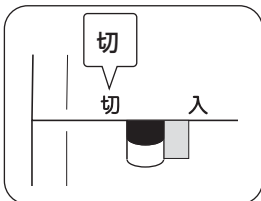

— タンク残水について —
溶液(食塩水など)を入れたとき、本体内部に溶質(食塩など)が入るのを防ぐため、故意に残るように設計されています。

9 使い方

⚠ 注意

ノズルの先端を歯や歯ぐきに接触させないでください。

・水流効果が低下したりノズルが変形する原因となります。




いきなり強い圧力で使わないでください。

・歯ぐきから出血する原因となります。

1 「水圧調節つまみ」を「弱」にします。

* 初めて使用する場合は、「弱」にしてください。


* 慣れるに従い、適度な水圧に調整してください。

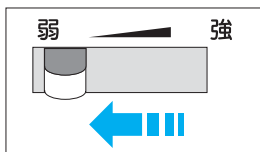


水圧調節つまみ

2 ノズルを洗面器などに向けます。

「手元スイッチ」を「出」、「電源スイッチ」を「入」に入れ約5秒間水を出します。

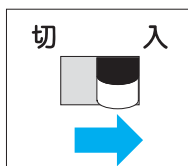

電源スイッチ

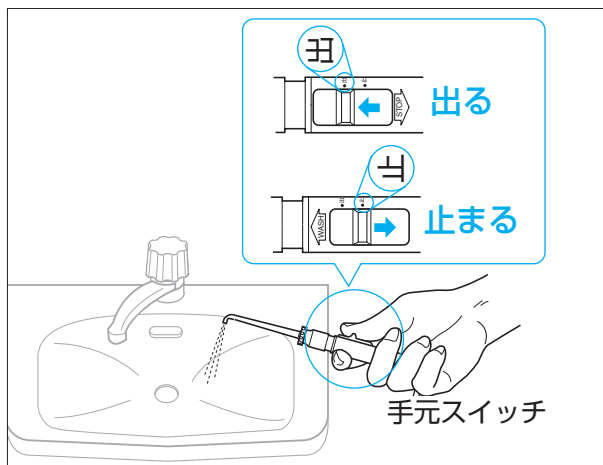


3 「手元スイッチ」を「止」側に下げ、一度水を止めます。

冬期ご使用時の凍結予防についてのお願い

凍結を予防するためコイルチューブ内に水が残らないように、ノズルを本体より下げて、残った水を出し切ってください。

凍結した場合は、タンクにぬるま湯（40℃以下）を入れ、自然に解凍するのを待ちます。

- 4 ノズルつまみを回せるように
「ノズルつまみ」を持ちます。

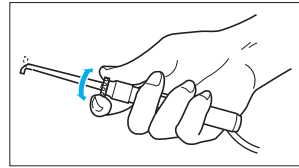


- 5 水が飛び散らないように
洗面台に向かってかがみます。



- 6 ノズルを口に入れ、口を閉じます。

- 7 「手元スイッチ」を「出」側に上げ水を出します。

- 8 「水圧調節つまみ」で強く感じる強さに調整します。

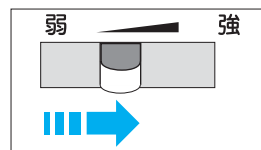


水圧調節つまみ

11 使い方

9 洗淨します。


ノズルをゆっくりと歯並びにそって移動させ、歯の表裏、噛み合わせ面をくまなく洗淨します。

*途中で水を止めたりする場合は、手元スイッチで操作してください。

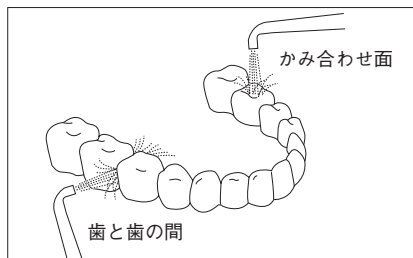

歯ぐきを洗淨する場合

水圧を多少弱めに調整し、歯と歯ぐきの間、歯ぐきに水流をあてます。

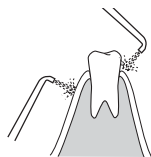

きれいに洗淨されたかチェックしましょう

食べカスがきれいに洗淨されているか、市販の歯垢染色剤など使用してチェックするのもよいでしょう。

10 洗淨が終わったら

「手元スイッチ」を「止」側に下げ、
「電源スイッチ」を「切」にします。

11 水アカがたまらないように 「水抜き運転」をします。

(1)もう一度、電源スイッチを「入」にし、手元スイッチを「出」側に上げます。

(2)ノズルから水が出なくなるまで運転します。(約5~10秒間)

■お手入れ

⚠注意

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
・感電の原因となります。



こんなとき	お手入れのしかた
タンクなど水に濡れた部分は	乾いた布で拭きとってください。
タンクや本体などが汚れた場合は	中性洗剤または水に浸した布で汚れを落とし、乾いた布で拭きとってください。
ノズル・ハンドピースなどは	水またはぬるま湯（40℃以下）で洗い、乾いた布で拭きとってください。
食塩水・水歯磨き・マウスウォッシュなどをご使用の後は	残りの水溶液を捨て、よく洗います。 タンクに水を入れ、ノズルから1～2分水を噴出させます。本体に残留している溶液を洗い出すことができます。

○お手入れと保管の注意

- ※汚れを落とすとき、ベンジン、シンナー、ガソリン、化学ぞうきんなどを使用しないでください。変色の原因になります。
- ※金属製のたわしや硬いスポンジなどは使用しないでください。本体に傷がつき、故障の原因になります。
- ※タンクに漂白剤などの洗剤を入れしないでください。本体内部でつまったり、本体内部が変質したりして故障の原因になります。
- ※次のようなところに保管しないでください。
 - ・水のかかるところ。
 - ・高温・多湿、風通し、直射日光、ホコリ、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ。
 - ・傾斜、振動、衝撃のあるところ。
 - ・化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ。

十分に乾燥させた後、箱に入れたり、カバーをかけるなど衛生面に配慮してください。

※はじめてお使いのときや、およそ1ヵ月以上使用しなかった場合にタンクに水やぬるま湯を入れ動作させると、一時的に本体底面の穴から水またはぬるま湯が出てくる場合があります。そのまま使い続けていると翌日には出なくなります。これは構造上やむを得ないもので故障ではありません。

※上記の注意事項、その他の正しい使用方法をお守りいただけない場合は、品質に責任を負いかねます。

13 おかしいな?と思ったら

おかしいな?と思ったら

こんなとき	考えられる原因	直しかた
水が出ない 水の出が悪い または 水圧が低い	電源プラグがしっかり差し込まれていない	→確実に差し込みます (☞ 7ページ)
	タンク底部の取付口にゴミ、塩などがたまっている	→ゴミを掃除してください (☞ 12ページ)
	ノズルの穴にゴミ、塩などがたまっている	→ノズルの穴を掃除してください (☞ 12ページ)
	本体とハンドピースの コイルチューブ取付部 から水がもれている	→修理を依頼してください (☞ 14ページ)
	タンクがしっかり取り つけられていない	→タンクを確実に取りつけてください (☞ 8ページ)
	製品内部が乾燥しき っている	→ノズルを製品本体より下にさげ、しばらく動作させてください
	本体の底面から水やぬ るま湯が出ている	→はじめてお使いのときや、およそ1ヵ月以上使用しなかった場合、一時的に本体底面の穴から水やぬるま湯が出てくる場合がありますが、そのまま使い続けていると翌日には水やぬるま湯は出なくなります (☞ 12ページ)

※上記の方法でも直らない場合は、オムロンお客様サービスセンターまでお問い合わせください。(☞ 14ページ)

※別売品「オムロン口腔洗浄器 HT-J202用スペアノズル」のお求めはオムロンお客様サービスセンターまでお問い合わせください。(☞ 14ページ)

仕様／お問い合わせ先 14

仕 様

商 品 名	オムロン口腔洗浄器エレピック	連続使用時間	7分
形 式	HT-J202	タンク容量	750mL
電 源	AC100V 50/60Hz	外 形 寸 法	幅179×高さ187×奥行き75mm
消費電力	23W	質 量	1.2 kg
圧力(最大)	約710kPa (約7kgf/F)	付 属 品	ノズル4本
脈 動 数 約	1800回/分	別 売 品	スペアノズル4色4本セット

※改良のため、仕様および外観を予告なく変更することがあります。

おかしいな?と思ったら

「おかしいな?と思ったら」13ページをもう一度ご確認ください。それでもお分かりいただけなかった場合は、下記のお客様サービスセンターにお問い合わせください。

オムロン健康商品のお問い合わせは

修理のご用命、別売品・消耗品のお求めも、この電話で承ります。
修理には、便利な引き取りサービスをご利用ください。



オムロンお客様サービスセンター ダイヤルは正確に

むろんオムロン



0120-30-6606

通話料無料

FAX

0120-10-1625

通話料無料

受付時間

9:00～19:00 月～金（祝日を除く）
都合によりお休みをいただいたり、
受付時間帯を変更させていただく
ことがありますのでご了承ください。

ホームページ <http://www.healthcare.omron.co.jp/>

※通話料はお客様ご負担となります。（別売品・消耗品は、インターネットでもお求めいただけます。）

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で、お買い上げ後1年以内に故障した場合には、無償修理または交換いたします。
- 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、オムロンお客様サービスセンターにご連絡ください。
- 無償保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。
 - (ニ) 本書の提示がない場合。
 - (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - (ヘ) 消耗部品。
 - (ト) 故障の原因が本商品以外に起因する場合。
 - (チ) その他取扱説明書（本書）に記載されていない使用方法による故障および損傷。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 補修用部品は製造打ち切り後、最低5年間保有しています。

品質保証書

このたびは、オムロン商品をお買い求めいただきありがとうございました。商品は厳重な検査を行ない高品質を確保しております。しかし通常のご使用において万一、不具合が発生しましたときは、保証規定によりお買い上げ後、一年間は無償修理または交換いたします。

※商品の保証は、日本国内での使用の場合に限りです。
This warranty is valid only in Japan.

※以下につきましては、必ず販売店にて、記入捺印していただきます。

品名 オムロン口腔洗浄器エレピック

形式 HT-J202

ご芳名

ご住所

TEL ()

お買い上げ店名

住所

TEL ()

お買い上げ年月日 年 月 日

発売元

オムロンヘルスケア株式会社

〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地

