

OMRON




オムロン電動ハブラシ

ハイパワーシュッシュ HT-B011


乾電池の入れ方

底ぶたをはずし、(+)(-)
に注意して入れてください。
単三形アルカリ乾電池を
ご使用ください。(1回2分の
使用で、約35回使用できます。)

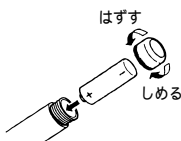

歯ブラシの入れ方

本体スイッチ側に歯ブラシ
の毛先を向けて差し込んで
ください。
歯ブラシは、毛先が開い
てきたら交換してください。

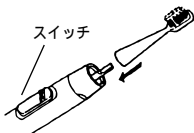


使い方

口の中に歯ブラシを入れてから、スイッチを「ON」
にしてください。電源が入り、電動歯ブラシが作動
します。ご使用後はスイッチを「OFF」に戻し、歯ブラ
シと本体を洗い、水分をよくふき取ってください。

磨き方

図のように歯ブラシを歯に当てて磨くと、歯垢除去
に効果的です。

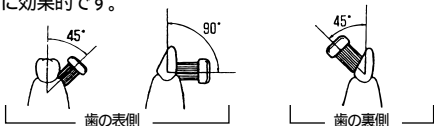

ご注意とお願い

- * 歯や歯ぐきの病気にかかっている方や、歯の治療を受けている方は、医師に相談のうえご使用ください。
- * お子様がお使いになるときは、大人がついて正しい使い方を教えてください。幼児には大人が磨いてあげてください。誤った使い方をされると危険です。
- * 本体を落としたり、衝撃を与えないでください。
- * 本体を分解したり、内部にふれたりしないでください。
- * 本体を水中に放置しないでください。
- * 直射日光の当たるところや、火気のそば、暖房器具等の近くには放置しないでください。
- * スペア歯ブラシは、オムロン電動歯ブラシの取扱店で「ハイパワーシュッシュ専用」とご指定のうえ、お求めください。
- * 本体は通常(1回2分)使用で約1.500回使用できます。



商品の使い方に関するお問い合わせはオムロン
健康相談室がお答えします。ダイヤルは正確に。

フリーダイヤル

むろんオムロン

0120-30-6606

受付時間 / 10:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 16:00 (月~金)

オムロン株式会社 東京都港区虎ノ門3-4-10

MADE IN CHINA