

OMRON




オムロン電動ハブラシ

ハイパーシュッシュ HT-B012

乾電池の入れ方

底ぶたをはずし、(+)(-) に注意して入れてください。
単三形アルカリ乾電池をご使用ください。(1回2分の使用で、約35回使用できます。)

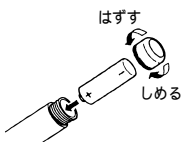

歯ブラシの入れ方

本体スイッチ側に歯ブラシの毛先を向けて差し込んでください。
歯ブラシは、毛先が開いてきたら交換してください。




使い方

口の中に歯ブラシを入れてから、スイッチを「ON」にしてください。電源が入り、電動歯ブラシが作動します。ご使用後はスイッチを「OFF」に戻し、歯ブラシと本体を洗い、水分をよくふき取ってください。

磨き方

図のように歯ブラシを歯に当てて磨くと、歯垢除去に効果的です。

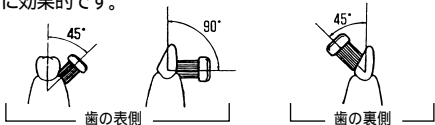

ご注意とお願い

- * 歯や歯ぐきの病気にかかっている方や、歯の治療を受けている方は、医師に相談のうえご使用ください。
- * お子様がお使いになるときは、大人がついて正しい使い方を教えてください。幼児には大人が磨いてあげてください。誤った使い方をされると危険です。
- * 本体を落としたり、衝撃を与えないでください。
- * 本体を分解したり、内部にふれたりしないでください。
- * 本体を水中に放置しないでください。
- * 直射日光の当たるところや、火気のそば、暖房器具等の近くには放置しないでください。
- * スペア歯ブラシは、オムロン電動歯ブラシの取扱店で「ハイパーシュッシュ専用」とご指定のうえ、お求めください。
- * 本体は通常(1回2分)使用で約1.500回使用できます。



商品の使い方に関するお問い合わせはオムロン健康相談室がお答えします。**ダイヤルは正確に。**

フリーダイヤル

むろんオムロン

0120-30-6606

受付時間 / 10:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 16:00 (月 ~ 金)

オムロン株式会社 東京都港区虎ノ門3-4-10

MADE IN CHINA