


取扱説明書

OMRON

オムロン体体重組成計
カラダスキャン
HBF-912
Karada Scan。

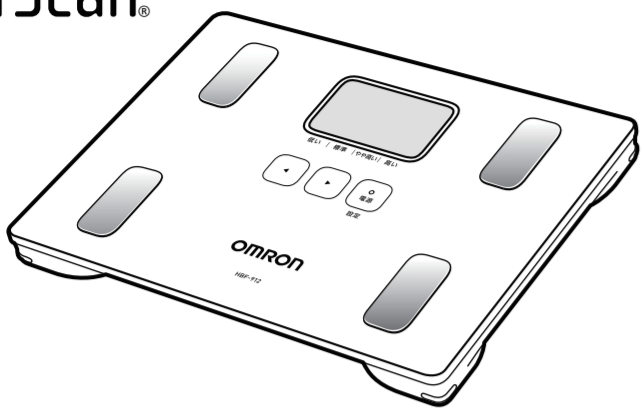

■本書に記載しているイラストはイメージ図です。

このたびは、オムロン商品をお買い上げいただきましてありがとうございました。

安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

本書は、いつもお手元においてご使用ください。

本書は品質保証書を兼ねています。紛失しないように保管してください。

All for Healthcare

オムロン健康商品のお問い合わせ

修理のご用命、別売品・消耗部品のお求めも、この電話で承ります。修理には、便利な引き取りサービスをご利用ください。



オムロンお客様サービスセンター「ダイヤルは正確に」

電話 **0120-30-6606** 通話料無料

FAX **0120-10-1625** 通話料無料

受付時間 月～金 9:00～19:00 (祝日除く)

都合によりお休みをいただいたり、受付時間帯を変更させていただくことがありますのでご了承ください。

ホームページ <http://www.healthcare.omron.co.jp/>

※通話料はお客様ご負担となります。(別売品・消耗部品は、インターネットでもお求めいただけます。)

5334167-08
HBF-912

1. 安全上のご注意

お使いになる前に必ずお読みください。

- ここに示した内容は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と意味は次のようになっています。

■危険、警告、注意について

	危険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危害が、切迫して生じることが想定される内容を示します。
	警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示します。
	注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容を示します。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

	●記号は強制 (必ず守ること) を示します。(左図は "必ず守る")
	○記号は禁止 (してはいけないこと) を示します。(左図は "禁止")

▲危険

下記のような医用電気機器との併用は、絶対しないでください。

- ①ペースメーカーなどの体内挿込型医用電気機器
- ②人工心肺などの生命維持用医用電気機器
- ③心電計などの装着型医用電気機器

●これら医用電気機器の誤動作をまねき、生命に著しい障害をもたらす原因になります。

▲警告

強化ガラスを使用しておりますが、本体を倒したり落としたり、上にものを落とすなど、本体に強い衝撃を与えないでください。

- 衝撃によりガラスが割れ、けがの原因になります。また正確な測定ができません。

タイルの上や、ぬれた床などのすべりやすいところでは使わないでください。

- すべってけがをする原因になります。

風呂上がりなど、体や手足がぬれている状態で測定しないでください。

- すべってけがをする原因になります。
- 内部に水が入って故障の原因になります。また、正確な測定ができません。

飛び乗ったり、跳ねたりしないでください。

- 転倒してけがをする原因になります。
- また、衝撃により使用範囲を超え、破損の原因になります。

本体の端に乗らないでください。

- 転倒してけがをする原因になります。また、正確な測定ができません。

体の不自由な方は、介護の方が付き添いのうえ、ご使用ください。

- 転倒してけがをする原因になります。

減量や運動療法などをおこなう場合は、自分だけで判断せず、医師が専門家の指導を受けてください。

必ず守る ●自己判断は健康を害する原因になります。

▲注意

- 本体を分解や修理・改造しないでください。
 - けがや故障の原因になります。
- 業務用(病院など)では使用しないでください。
 - 家庭用計量器の基準に適合しています。業務用に要求される機能は備えていません。
- 本体の近くで携帯電話を使わないでください。
 - 携帯電話の影響により、正しく測定できない場合があります。
- 測定するときは素足で乗ってください。
 - すべってけがをする原因になります。また、正確な測定ができません。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
 - けがの原因になります。
- 電池の⊕/⊖極を正しく入れてください。
 - 発熱や液漏れ、破裂などにより本体の破損や、けがの原因になります。
- 指定の電池を使ってください。
 - 新しい電池と古い電池、銘柄や種類の違う電池を同時に使用しないでください。
 - 発熱や液漏れ、破裂などにより本体の破損や、けがの原因になります。
- 長期間(3か月以上)使用しないときは、電池を取り外してください。
 - また、使用済みの電池はすぐに取り外し、すべて同時に新しいものと交換してください。
 - 液漏れなどにより、本体の破損や、けがの原因になります。

お願い

■設置について

いつも清潔にしてお使いください。

湿気の多い場所、水のかかる場所、直射日光の当たる場所、空調機の風が直接当たる場所や火気のそばには置かないでください。

- 故障の原因になります。

畳やじゅうたんなどの柔らかい床面で使用しないでください。

- 脚が沈み本体表面が床に着くと、正確な測定ができない場合があります。

■取り扱いについて

足に皮膚病などの感染症がある方と併用するときは、清潔にしてからお使いください。

- 感染の原因になります。併用するときは、水または中性洗剤をしみこませてよく絞った柔らかい布で、表示操作部や本体を拭き取ります。その後、から拭きしてください。

体重体組成をはかる目的以外には使わないでください。

表示操作部に乗らないでください。

- 誤動作の原因になります。

■お手入れについて

本体を水洗いしないでください。

- 故障の原因となります。

いつも清潔にしてお使いください。

- 本体の汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- 汚れのひどいときは、水または中性洗剤をしみこませてよく絞った柔らかい布で拭き取ります。その後、から拭きしてください。

汚れを落とすとき、ペンシン、シンナーなどを使用しないでください。

- 変色や故障の原因になります。

お手入れの際、スイッチに触れて、個人データを変更/削除しないように注意してください。

■保管について

立てて収納する場合は、必ず倒れないような場所に収納してください。

次のようなところに保管しないでください。

- 水のかかる場所
- 高温・多湿、直射日光、ほこり、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ
- 傾斜、振動、衝撃のあるところ
- 化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ

物をのせた状態や裏返しの状態を保管しないでください。

- 誤動作の原因になります。

正しく測定できない場合

- 次のような方は、正しく体組成が測定できない場合があります。
 - 成長期の児童/高齢者/風邪などで発熱中の人/妊娠中の人/骨の密度が非常に低い骨粗しょう症患者/むくみのひどい人/人工透析患者/ボディビルダーやスポーツを職業にしている人またはそれに近い人
 - 体内水分量などの体組成が、平均的な値と差が大きい可能性があるためです。

測定値がおかしいと思ったときは… (「設定」10. おかしい?と思ったら)

2. 各部の名前

表示操作部

表示部 図はすべての表示内容です。

操作スイッチ 指の腹でしっかり触れてください。

スイッチ 触れるごとに1つ戻ります。触れたままにすると早戻しします。

スイッチ 触れるごとに1つ進みます。触れたままにすると早送りします。

マーク 操作スイッチに触れたとき点灯します。

電池交換マーク

電源/設定スイッチ 電源を入れたり、値を確認するとき触れます。3秒以上触れると電源が切れます。

本体

電極

電極

脚 (4カ所)

3. 電池を入れる/交換する

- 1 本体表面のつまみを押して、電池カバーを外す。
 - 電池カバーのつまめを矢印方向に押し、電池カバーを外す。
 - 電池カバーのつまめを上方向に持ち上げる。
- 2 電池を図の表示に合わせて入れる。
 - ばねの出ているほうが⊖です。
- 3 電池カバーを閉める。

電池の寿命と交換について

- 約1年測定できます。(単4形マンガン乾電池使用、室温23℃、1日4回測定時)
 - 付属の電池はお試用です。早めに寿命が切れることがあります。
 - 充電式電池は使用しないでください。誤動作の原因になります。
- 電池交換マークが点灯したときは、電池が消耗しています。すべて同時に新しい電池(同じ種類のもの)と交換してください。
- 電源を切ってから、電池を交換してください。
 - 電池を交換しても、個人データは保持されます。
 - 使用済みの電池は、お住まいの市区町村の指導に従って処分してください。

電源オフについて

- 電源オフボタンに3秒以上触れると「OFF」を表示して電源が切れます。
- 次の場合は自動的に電源が切れます。
 - 「0.0kg」が表示されているときに、約1分間何も操作をしなかった場合
 - 個人データの登録などを行っているときに、約3分間何も操作をしなかった場合
 - 体重の測定結果が表示されているときに、約30秒間何も操作をしなかった場合
 - 体組成の測定結果が表示されているときに、約3分間何も操作をしなかった場合
 - 「Err」が表示された場合(約10秒後)

4. お住まいの地域を設定する

本商品では体重を正確に測定するために重力加速度の影響を補正します。お住まいの地域を正しく設定しないと、正確な測定ができません。

■ 下の表でお住まいの地域番号が1か2かを確認してください。

地域番号 1	北海道 青森県 岩手県 秋田県 宮城県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 新潟県 富山県 石川県
地域番号 2	上記以外



- 1 電源ボタンを押し、いずれかに触れて電源を入れる。
 - 地域番号「2」が点滅します。お住まいの地域番号が「2」の方は手順3へ進んでください。
- 2 地域番号を選ぶ。
 - 地域番号「2」と「1」を交互に表示します。お住まいの地域番号を選んでください。
- 3 電源ボタンに触れる。
 - 地域が確定して、自動的に電源が切れます。

■ 設定した地域を修正するには… 電池を抜いて20秒以上経過してから入れ直し、電源を入れてください。

5. 個人データ(年齢・性別・身長)を登録する

体重体組成をはかるためには、あらかじめ年齢・性別・身長を登録しておく必要があります。個人データは4人まで登録することができます。個人データを登録していない方でも、ゲスト機能を使うと体重体組成をはかることができます。ゲスト機能とは… (「設定」7. 体重体組成をはかる)

- 1 電源ボタンを押し、電源を入れる。
 - 全点灯のあと、「0.0kg」を表示します。電源ボタンに触れても電源は入りません。手順2に進んでください。
- 2 個人番号を選ぶ。
 - 個人番号またはゲストを選び、電源ボタンに触れる。
 - 「0.0kg」を表示したときは、その個人番号はすでに登録済みです。別の番号をお使いいただくか、個人データを削除してください。
 - 「設定」6. 個人データを登録/削除する

- 3 「年齢」を設定する。
 - 「年齢」を合わせて、電源ボタン(設定)に触れる。
 - 設定範囲は10~80才です。
 - 設定した年齢は自動で更新されないため、必ず毎年誕生日ごとに年齢を更新してください。年齢を正しく設定しないと正確な測定ができない場合があります。
- 4 「性別」を設定する。
 - 「男」または「女」を選び、電源ボタン(設定)に触れる。
 - 「年齢」が確定し、「性別」が点滅します。
- 5 「身長」を設定する。
 - 「身長」を合わせて、電源ボタン(設定)に触れる。
 - 設定範囲は100.0~199.5cmです。

身長が確定すると、「年齢」「性別」「身長」を表示したあと、「0.0kg」と表示します。

これで登録が終わりました。続けて体重体組成を測定することもできます。(「設定」7. 体重体組成をはかる) 測定しない場合は電源を切ってください。

■ 次のようなときは登録できていません。個人データの登録をやり直してください。

- 設定中に3分以上操作をしないで電源が自動的に切れたとき
- 設定中に電源を切ったとき

6. 個人データを変更/削除する

- 1 電源ボタンに触れて電源を入れる。
 - 全点灯のあと、「0.0kg」を表示します。電源ボタンに触れても電源は入りません。手順2に進んでください。
- 2 個人番号を選ぶ。
 - 「P1」~「P4」を点滅表示したときは… 選んだ個人番号に、個人データが登録されていません。個人データを登録してください。(「設定」5. 個人データを登録する)
- 3 電源ボタンに触れて確定する。
 - 「<」「>」が消えます。
- 4 電源ボタンに再度触れる。
 - 「変更」「削除」が点滅します。中止するときは、電源ボタン(設定)に触れてください。

個人データを変更するときは

- 5 「変更」を選ぶ。
 - 「変更」が点滅します。
- 6 電源ボタンに触れる。
 - 登録されている年齢が点滅します。「5. 個人データを登録する」の手順3から5までの操作をし、変更してください。
- 7 電源ボタンに再度触れる。
 - 変更途中で設定を間違ってしまった場合は、身長までで確定させ、もう一度最初から操作して変更してください。

個人データを削除するときは

- 5 電源ボタンに「削除」を選ぶ。
 - 「削除」が点滅します。
- 6 電源ボタンに触れる。
 - 選んだ個人番号の登録内容が点滅します。
- 7 電源ボタンに再度触れる。
 - 「削除」を中止するときは、電源ボタンのいずれかに触れてください。

これで個人データの変更が終わりました。続けて体重体組成を測定することもできます。測定しない場合は電源を切ってください。

7. 体重体組成をはかる (個人番号ではかる/ゲストではかる)

個人番号ではかる場合は、あらかじめ個人データを登録しておきます。
 (「5. 個人データを登録する」)
 個人データを登録していない方は、ゲスト機能を使ってはかることができます。

！ 硬く平らな床面で測定してください。
 畳やじゅうたんなどの柔らかい床面では正確な測定ができない場合があります。

1 **電源を入れて電源を入れる**

全点灯のあと、「0.0kg」を表示します。

「0.0kg」を表示する前に本体に触れたり、動かしたり、上にものを置いたりしないでください。正しく測定できない場合があります。

全点灯中は、正しく測定するための準備をしているところです。「0.0kg」を表示する前に動かしたり、荷重をかけたリすると「Err (エラー)」(「10. おかしいな?と思ったら」)を表示したり、正しく測定できない場合があります。

に触れても電源は入りません。手順2に進んでください。

2 **個人番号を選ぶ**

で個人番号またはゲストを選び、(設定)に触れる

「P1」～「P4」を点滅表示したときは…

選んだ個人番号に、個人データが登録されていません。個人データを登録してください。(「5. 個人データを登録する」)

ゲスト機能を使ってはかる方

ゲスト機能とは…
 個人データを登録していない方でも、そのつど年齢・性別・身長を入力することで体重体組成をはかることができる機能です。

(設定)に触れる

「年齢」「性別」「身長」を設定する

「年齢」が点滅します。「5. 個人データを登録する」の手順3から5までの操作をし、設定してください。

3 **測定する**

1 本体に乗る

素足で乗ります
 電極をかかとで踏むように乗ります。

靴下などをはいたまま乗ると、正確な測定ができません。

体組成測定中は、測定していることをの動きでお知らせします。

2 測定結果が表示されたら、測定完了です


本体から降りてください。

こんな姿勢はダメ！ 正確な測定ができません。

しゃがむ × ひざが曲がっている × 足裏が電極とずれている ×

4 測定結果を確認する

結果は自動的に切り替わります。
 自動的に切り替わる表示を止めたいときや、別の測定値を見たいときは、またはに触れてください。またはに触れるごとに次のように表示が切り替わります。

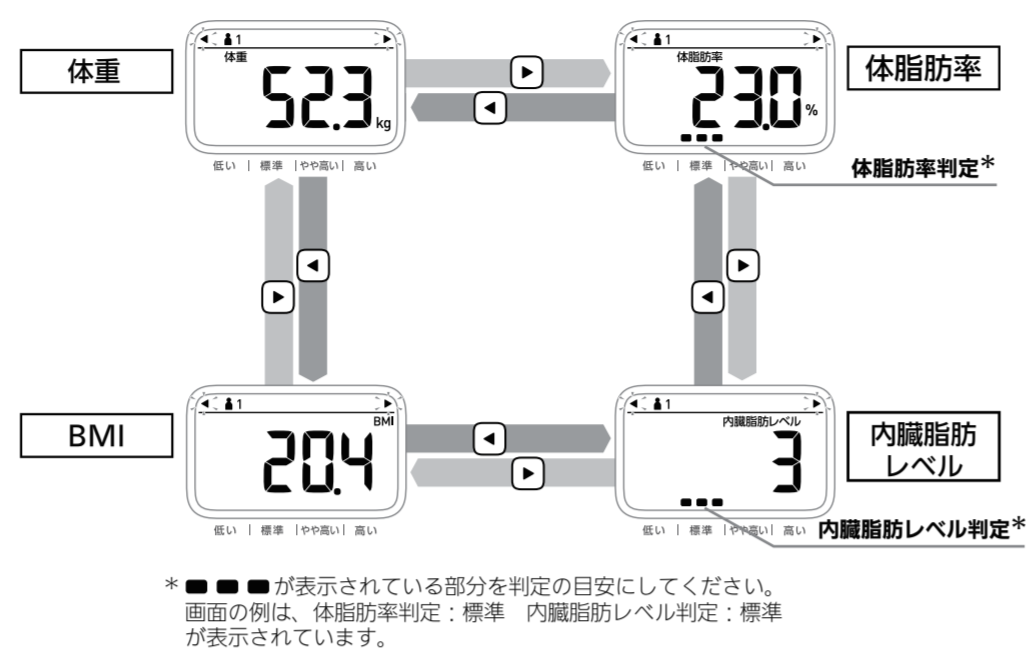

5 電源を切る

8. 指標

BMI とは…

「Body Mass Index」(=体格指数)の頭文字「B・M・I」をとったもので、肥満度を判定する国際的な基準です。BMI はとてもシンプルな計算式から求められます。

BMI = 体重 (kg) ÷ 身長 (m) ÷ 身長 (m)

本品は、登録された個人データの「身長」と、測定した「体重」から BMI を算出します。

理想体重は BMI 「22」のとき

もっとも理想的な BMI は「22」とされています。肥満・やせを原因とする病気にかかりにくく、長生きできるというわけです。理想体重、つまり BMI 「22」のときの体重は次の式で求められます。

理想体重 (kg) = 22 × 身長 (m) × 身長 (m)

例) 身長 155 cm の人の理想体重は… 22 × 1.55 × 1.55 = 52.855 → 約 52.9kg
 ただし、BMI は身長と体重で求めますから、筋肉で体重の重い運動選手などは適切な判定ができません。

体脂肪率とは…

体重のうち、体脂肪の重さが占める割合のことです。

体脂肪率 (%) = (体脂肪の重さ (kg) ÷ 体重 (kg)) × 100

体脂肪率の判定基準は男性と女性で異なります

体脂肪というと、何となく悪者のイメージがありますが、エネルギーを貯蔵したり、内臓を保護したりと、いろいろな役目を果たしています。多すぎるのはもちろんですが、少なすぎるのもよくありません。男性と女性では体脂肪のつき方が違うため、判定基準も異なります。

内臓脂肪レベルとは…

腹部 CT スキャン画像を使って内臓のまわりについている脂肪面積の大きさを自社データに基づいて 30 段階にレベル化したもので、当社独自の推定式により算出されます。

〈体脂肪率〉		判定
男性	女性	
5.0 ~ 9.9 %	5.0 ~ 19.9 %	低い
10.0 ~ 19.9 %	20.0 ~ 29.9 %	標準
20.0 ~ 24.9 %	30.0 ~ 34.9 %	やや高い
25.0 % ~	35.0 % ~	高い

※体脂肪率が低く、内臓脂肪レベルが高い場合もあり、逆に体脂肪率が高くても、内臓脂肪レベルが低い場合もあります。

〈内臓脂肪レベル〉		判定
内臓脂肪レベル	判定	
1 ~ 9	標準	
10 ~ 14	やや高い	
15 ~ 30	高い	

※内臓脂肪レベルはあくまでも目安です。医学的診断については、医師にご相談ください。

各指標について詳しくは、弊社ホームページ (<http://www.healthcare.omron.co.jp>) 体重体組成計のページを参照してください。

9. 体重だけをはかる

体重だけをはかる方は、個人データを登録する必要はありません。

！ 硬く平らな床面で測定してください。
 畳やじゅうたんなどの柔らかい床面では正確な測定ができない場合があります。

1 **電源を入れて電源を入れる**

全点灯のあと、「0.0kg」を表示します。

「0.0kg」を表示する前に本体に触れたり、動かしたり、上にものを置いたりしないでください。正しく測定できない場合があります。

2 **本体に乗る**

3 **測定結果を確認する**

2 回点滅して体重値が確定したことをお知らせします。

4 **本体から降り、電源を切る**

10. おかしいな?と思ったら

■ エラー表示が出た

エラー表示	原因	対処のしかた
Err 1	体組成の測定中に本体から降りた 足裏が電極に密着していなかった	体組成の測定が終了するまで本体から降りないでください (「7. 体重体組成をはかる」) 足裏を電極に密着させて測定してください (「7. 体重体組成をはかる」)
Err 2	測定姿勢が悪かったり、足裏が電極に密着していなかったまたは、足裏が乾燥していた	足を動かさないように測定してください (「7. 体重体組成をはかる」) ぬらしたタオルなどで足裏を少し湿らせてから測定してください
Err 5	動作異常が起きた	もう一度、電源を入れ直して測定してください それでもこのエラーを表示する場合は、本商品の故障が考えられます オムロンお客様サービスセンターまで修理を依頼してください (「表紙」)
Err	「0.0kg」を表示する前に、本体に乗った	表示が「0.0kg」になってから、本体に乗ってください
	「0.0kg」を表示する前に、本体を動かした	表示が「0.0kg」になるまでは、本体を動かさないでください
	測定中に体を動かした	測定中は体を動かさないでください
	体重が測定範囲を超えた	体重が135kgを超える方は、ご使用になれません

■ 測定値がおかしい、動作がおかしい

こんなとき	原因	対処のしかた
本体に乗っても「0.0kg」と表示する、または体重値がほとんど増えない 体重値が異常に多く(または少なく)表示される	表示が「0.0kg」になる前に本体に乗った	表示が「0.0kg」になってから本体に乗ってください
測定値が異常に高い、または低い	正しい姿勢で測定していない	正しい姿勢で測定してください (「7. 体重体組成をはかる」)
	じゅうたんなどの柔らかい床面や、凹凸のある床面の上で測定している	硬く平らな床面で測定してください
	足裏、また体自体が冷えてしまったり、血行が悪くなっている	体を温めるなどして、血行が通常の状態に戻ってから測定してください
測定のたびに極端に値が違う	電極部が非常に冷たくなっている	暖かい部屋などにしばらく置いて、電極に触っても冷たく感じない程度になったら測定してください
	足裏が乾燥している	ぬらしたタオルなどで足裏を少し湿らせてから測定してください
体組成をはかりたいのに、体重値確定後、体組成の測定が開始されない	個人番号またはゲストの登録をしていない (表示部に個人番号や「ゲスト」が表示されていない)	個人番号またはゲストの登録をしてから測定してください (「5. 個人データを登録する」/「7. 体重体組成をはかる」)
	個人番号またはゲストを正しく選択できていない (表示部に個人番号やゲストが表示されていない)	個人番号またはゲストを正しく選択してから測定してください (「7. 体重体組成をはかる」)
電源を入れても何も表示しない	電池が入っていない	電池を入れてください (「3. 電池を入れる/交換する」)
	電池の方向を間違えて入れている	正しい方向にきちんと入れてください (「3. 電池を入れる/交換する」)
	電池残量がなくなっている	電池を交換してください (「3. 電池を入れる/交換する」)
操作スイッチに触れても動作しない	操作スイッチに水や汚れが付いている	水や汚れを拭き取ってから操作してください。

こんなとき	原因	対処のしかた
一部の結果で「----」を表示する	登録した値や体組成の値が測定可能範囲外だった	設定した年齢・性別・身長が間違っていないか確認してください 年齢・性別・身長を正しく設定していても、測定可能範囲外の場合は測定できません。 測定可能範囲 (「11. 仕様」)
何もしていないのに電源が切れる	「電源オフについて」(「3. 電池を入れる/交換する」)をご参照ください	

※前記の「対処のしかた」を実施しても、正常に測定ができない場合は故障が考えられます。商品の故障および修理のご依頼につきましては、オムロンお客様サービスセンターまでご連絡ください。(「表紙」)
 ※ごくまれにその方の体質上誤差を生じて測定できない方がおられます。このような場合にもオムロンお客様サービスセンターまでご相談ください。(「表紙」)
 ※本商品の故障、修理のときは、個人データはすべて削除されますのでご了承ください。

11. 仕様

販売名	オムロン 体重体組成計 HBF-912 カラダスキャン		
表示	体重	2 ~ 100 kg まで	: 100 g 単位
		100 ~ 135 kg まで	: 200 g 単位
	BMI	2.5 ~ 90.0	: 0.1 単位
	体脂肪率	5.0 ~ 50.0%	: 0.1% 単位
判定	体脂肪率判定	4段階 (低い/標準/やや高い/高い)	対象年齢 10才以上 80才以下
	内臓脂肪レベル	1 ~ 30	: 1 レベル単位
判定	内臓脂肪レベル判定	3段階 (標準/やや高い/高い)	対象年齢 18才以上 80才以下
	設定項目	重力補正 個人データ登録 [地域番号「1」または「2」] 年齢 性別 身長	地域番号「1」または「2」 個人データ登録 [地域番号を 4 人分登録できます。] 10 ~ 80 才 男/女 100.0 ~ 199.5 cm : 0.5 cm 単位 ※ゲストではかる場合の個人データはそのつど設定します。
体重計精度	2.0 kg を超え 67.5 kg まで	: ± 200 g	
	67.5 kg を超え 100.0 kg まで	: ± 300 g	
	100.0 kg を超え 135.0 kg まで	: ± 600 g	
電源	単 4 形マンガン乾電池 4 個 (R03) [単 4 形アルカリ乾電池 (LR03) もご使用になれます]		
電池寿命	約 1 年 (単 4 形マンガン乾電池使用、室温 23℃、1 日 4 回測定時)		
使用環境湿度	+ 5 ~ + 35℃	30 ~ 85% RH	
保管環境湿度	- 20 ~ + 60℃	10 ~ 95% RH	
質量	約 1.3 kg (電池含む)		
外形寸法	幅 約 285 × 高さ 約 28 × 奥行 約 210 mm		
付属品	お試し用電池 (単 4 形マンガン乾電池 4 個)、取扱説明書 (本書: 品質保証書付き)		

お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
 *9才以下81才以上の方: 体組成、BMIは測定できません。
 17才以下81才以上の方: 内臓脂肪レベルは測定できません。

体重計の精度について

この体重計は計量法に定められた技術基準で製造し、厳重な検査のうえ、出荷しております。この商品のメーカー保証精度は、上記の体重計精度欄に記載のとおりです。

この体重計はご家庭で体重をはかるために製造されたばかりです。物の売買取引や、そのものの目方が正しいかどうかなどを証明することには、計量法により使用できませんのでご注意ください。

正 家 庭 用

12. 保証規定・保証書

- 保証規定**
- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で、お買い上げ後 1 年以内に故障した場合には無償修理または交換いたします。
 - 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、オムロンお客様サービスセンターにご連絡ください。
 - 無償保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、周波数) などによる故障および損傷。
 - (ニ) 品質保証書の提示がない場合。
 - (ホ) 品質保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - (ヘ) 消耗部品。
 - (ト) 故障の原因が本商品以外に起因する場合。
 - (チ) その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障および損傷。
 - 品質保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
 - 品質保証書は本規定に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証を約束するものではありません。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 - 補修用部品は製造打ち切り後、最低 6 年間保有しています。

品質保証書

このたびは、オムロン商品をお買い求めいただきありがとうございます。商品は厳重な検査をおこない高品質を確保しております。しかし通常のご使用において万一、不具合が発生したときは、保証規定によりお買い上げ後、一年間は無償修理または交換いたします。

※商品の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。 ※以下につきましては、必ず販売店にて、記入印刷していただく必要があります。

This warranty is valid only in Japan.

販売元 オムロン 体重体組成計 HBF-912 カラダスキャン

お買い上げ店名 _____

ご芳名 _____

ご住所 _____

住所 _____

TEL () _____

TEL () _____

お買い上げ年月日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

発売元
オムロンヘルスケア株式会社
 〒617-0002 京都府向日市寺戸町丸ノ坪53番地