

主 な 仕 様

本体		非観血圧測定	
販 売 名	オムロン 自動血圧計 HBP-9010C	測定原理	オシロメトリック法
医療機器認証番号	308AHBZX00002000	測定範囲	血圧測定範囲 最高血圧：60～260mmHg 最低血圧：30～215mmHg 脈拍数測定範囲 40～180拍毎分
一般的名称	医用電子血圧計	測定精度	血圧：平均±5mmHg以内、標準偏差8mmHg以内 脈拍数：読み取り数値の±5%以内
販売商品コード	HBP-9010C	加圧方式	ポンプによる自動加圧方式
JANコード	4975479428142	適用腕周範囲	17～42cm
医療機器の分類	管理医療機器	通信方式	
特定保守管理医療機器	該当	Bluetooth®	使用周波数帯：2.4GHz(2400～2483.5MHz) 変調方式：GFSK 有効放射電力＜20dBm
使用環境条件	温度：5～40℃ 湿度：15～85%RH(結露なきこと) 気圧：700～1060hPa	USB	USB2.0 <推奨するUSB ケーブル> USB2.0に適合した、両端にフェライトコアの付いた長さ2.0m以内のもの
輸送/保存環境条件	温度：-20～60℃ 湿度：10～95%RH(結露なきこと)		
寸 法	幅370×高さ270×奥行420mm(アームレストを除く)		
質 量	約4.5kg		
表示方式	デジタル表示方式		
付 属 品	電源ケーブル・専用ACアダプタ アームレスト・取扱説明書(品質保証書付)		

ACアダプタ	
型 式	HBP-ACCA-903
電撃保護形式	クラスⅡ機器
電 源	AC100V 50-60Hz

・お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。 ・本製品はJIS T 1115:2018+A1:2023に適合しています。
・本製品は、ISO81060-2:2013の要件に従って臨床評価されており、ISO81060-2:2018+A1:2020に適合しています。
臨床的有効性試験において、K4は7名の被験者に、K5は78名の被験者に使用され、最低血圧の測定が行われました。

商標について ・本書に商品名が記載されている場合、その商品名は当該会社の商標または登録商標となっている場合があります。

別 売 品

	アームレスト 型 番： HBP-ARM-903 JAN： 4975479198991		専用 AC アダプタ 型 番： HBP-ACCA-903 JAN： 4975479199004		電源ケーブル 型 番： HBP-CRD-903 JAN： 4975479198977
	カフカバー (1セット) 型 番： HBP-9021-CUCO JAN： 4975479188770		腕帯ユニット (カフカバー付き) 型 番： HBP-ARU-903 JAN： 4975479198984		架台セット (専用架台と専用イス) 型 番： HBP-ST-903 JAN： 4975479198960

△安全に関するご注意

- 測定結果の自己判断はしないでください。症状の悪化につながる場合があります。治療は医師の指導に従ってください。
 - ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しく安全にお使いください。
 - このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所などを限定するものがあります。お買い上げの販売店にご確認ください。
 - 商品には安全にお使い頂くための注意シールが貼ってあるものがあります。
ご使用の際はご確認ください。
- ※改良のため、断わりなく仕様を変更する場合があります。ご了承ください。※商品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。

お知らせ

ごくまれに体質上誤差を生じて、正しく測れないことがあります。医師にご相談ください。

製品のお問い合わせ、別売品や消耗品のご注文は

オムロン ヘルスケア お客様サポート
<https://store.healthcare.omron.co.jp/support/>

オムロン お客様サービスセンター
TEL 0120-30-6606 (通話料無料) 受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

〒515-8503 三重県松阪市久保町1855-370 ※都合により、お休みや受付時間の変更をさせていただく場合があります。



オムロン ヘルスケア株式会社 〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪 53 番地
ホームページ <https://www.healthcare.omron.co.jp/>

2026年6月発行



オムロン 自動血圧計 HBP-9010C

健太郎®



コンパクト設計で置きやすい。 測定データを通信で簡単転送。

従来機種よりコンパクトになり
設置しやすくなりました。
また通信機能搭載なので、
測定結果をパソコンや
その他の機器に転送できます。
可動式腕帯なので
正しい姿勢を自然に保てます。




オムロン 自動血圧計 HBP-9010C

健太郎® 4 975479 428142

簡単に交換可能な腕帯ユニット

別売品として交換用腕帯ユニットをご用意。設置された状態のまま手早く交換ができます。
腕帯の交換タイミングも機器からお知らせ。

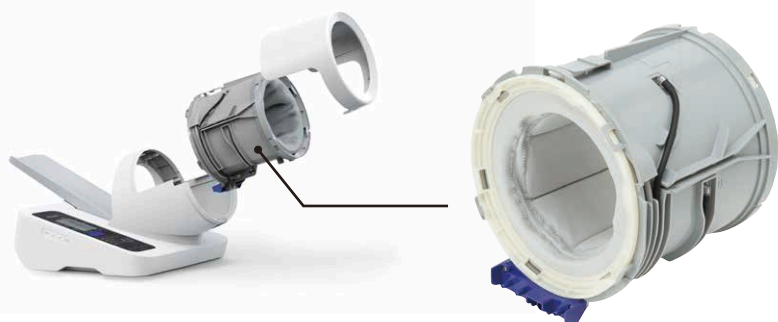

腕帯ユニット（カフカバー付き）
型番：HBP-ARU-903



腕帯交換アイコンが
点滅して交換時期を
お知らせ



多様な方式で測定データの通信が可能

USBケーブル、Bluetooth®でデータ通信可能。
健太郎® HBP-9010Cとパソコンなど端末機器に接続すると直接測定値を転送できます。



※システムにあわせて端末のソフトウェアを準備する必要があります。 ※ご使用のシステムとの連携は各システムベンダー様へお問い合わせください。

その他豊富な機能を搭載

◎ 腕の細い人から太い人
(腕周17-42cm) まで広範囲に測定

◎ 可動式腕帯
腕帯が可動するため
背の高い方も無理なく
正しい姿勢で測定できます。



◎ 左右どちらの腕でも測定可能



左腕測定時

右腕測定時

キオスク血圧測定のおすすめ

まずは“知る”ことから始めよう、あなたの血圧

“キオスク”は街角の小さな店などの場所のこと。そのような場所で行われる血圧測定を“キオスク血圧測定”といいます。スポーツジムや自治体、公共施設や職場、医療施設の待合室、健診・検診会場、介護施設、災害時の避難所、薬局などにおいてある自動血圧計で測定してみてください。

※参考 特定非営利活動法人 日本高血圧学会「キオスク測定＆血圧朝活のススメ」冊子より



様々な施設の
効率運営を
サポート



トラック運送事業者様



ドラッグストア様

くわしくはこちら

