


主な仕様

本 体		非観血圧測定	
販 売 名	自動血圧計 HBP-9030 シリーズ	測定原理	オシロメトリック法
医療機器認証番号	231ABBZX00007000	測定範囲	圧力:0～299mmHg 脈拍:40～180拍/分
一般的名称	医用電子血圧計	測定精度	圧力:±3mmHg 脈拍:±5%
商品型式名	HBP-9031C	加圧方式	ポンプによる自動加圧方式
JANコード	4975479417221	対象腕周	17～42cm
医療機器の分類	管理医療機器	通信方式	
特定保守管理医療機器	該当	Bluetooth®	Bluetooth Low Energy 使用周波数帯：2.4GHz (2400～2483.5MHz) 変調方式：GFSK 有効放射電力<20dBm
使用環境条件	温度:5～40℃ 湿度:15～85%RH (結露なきこと) 気圧:700～1060hPa	有線LAN	IEEE802.3準拠 Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX)
保存環境条件	温度: -20～60℃ 湿度:10～95%RH (結露なきこと) 気圧:700～1060hPa	無線LAN	[2.4GHz帯] IEEE802.11b/g/n準拠 周波数範囲 2412～2472MHz (1～13ch) IEEE802.11nはIEEE802.11gで使用可能なチャネルに対応
寸 法	幅460×高さ270×奥行420mm (アームレストを除く)	USB	USB 2.0 <推奨するUSBケーブル>USB 2.0に準拠した、 両端にフェライトコアの付いた長さ2.0m以内のもの
質 量	約5.5kg	お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。 ・ 上腕血圧の臨床評価は血圧モードを使用し、ISO81060-2:2013に従って実施しています。 ・ 本製品は下記の規格に適合しています。 JIS T 1115:2018+A1:2023	
表示方式	デジタル表示方式		
付 属 品	電源ケーブル・プリンタ用紙 No.16 (1巻)・専用ACアダプタ アームレスト・取扱説明書 (品質保証書付)		
ACアダプタ			
型 式	HBP-ACCA-903		
電撃保護形式	クラスⅡ機器		
電 源	AC100V 50-60Hz		

商標について

- ・本書に商品名が記載されている場合、その商品名は当該会社の商標または登録商標となっている場合があります。
- ・Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する商標であり、オムロンヘルスケア株式会社は、これらの商標を使用する許可を受けています。

別売品

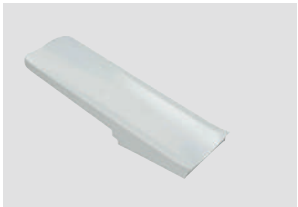

アームレスト
型番: HBP-ARM-903
JAN: 4975479198991



専用 AC アダプタ
型番: HBP-ACCA-903
JAN: 4975479199004



電源ケーブル
型番: HBP-CRD-903
JAN: 4975479198977



カフカバー (1セット)
型番: HBP-9021-CUCO
JAN: 4975479188770



腕帯ユニット (カフカバー付き)
型番: HBP-ARU-903
JAN: 4975479198984



架台セット (専用架台と専用イス)
型番: HBP-ST-903
JAN: 4975479198960



プリンタ用紙 No.16 (10個入)
型番: HBP-PAPER-NO16H
JAN: 4544949002351

△安全に関するご注意

- 測定結果の自己判断はしないでください。症状の悪化につながる場合があります。治療は医師の指導に従ってください。
 - ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しく安全にお使いください。
 - このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所などを限定するものがあります。お買い上げの販売店にご確認ください。
 - 商品には安全にお使い頂くための注意シールが貼ってあるものがあります。ご使用の際はご確認ください。
- ※改良のため、断わりなく仕様を変更する場合があります。ご了承ください。※商品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。

お知らせ

ごくまれに体質上誤差を生じて、正しく測れないことがあります。医師にご相談ください。

製品のお問い合わせ、別売品や消耗品のご注文は

オムロンヘルスケア お客様サポート

<https://store.healthcare.omron.co.jp/support/>

オムロン お客様サービスセンター

TEL 0120-30-6606 (通話料無料) 受付時間 9:00～17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)

〒515-8503 三重県松阪市久保町1855-370 ※都合により、お休みや受付時間の変更をさせていただく場合があります。



お問い合わせ、ご用命は…

OMRON

自動血圧計 HBP-9030 シリーズ
HBP-9031C

健太郎®



液晶画面で測定手順をナビゲート 簡単に正確な測定ができる 「正確測定サポート」機能を搭載

健太郎® HBP-9031Cは、ひとりで簡単に測定できる

「正確測定サポート」機能を搭載。

「ひじ検知センサ」がひじの位置を検出し、

正しい腕の位置をお知らせします。

可動式腕帯の採用で自由に角度調節ができ、

正しい姿勢を自然に保てます。

これらの機能をもとに、

液晶画面で測定ナビゲーションを行い

正しい測定姿勢に導くことで、

より正確な血圧測定が可能になりました。




自動血圧計 HBP-9030 シリーズ
HBP-9031C

健太郎®




簡単に交換可能な腕帯ユニット

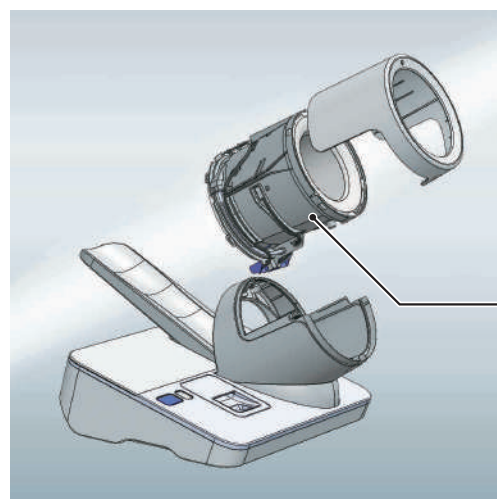

別売品として交換用腕帯ユニットをご用意。
設置された状態のまま手早く交換ができます。
腕帯の交換タイミングも機器からお知らせ。



腕帯ユニット（カフカバー付き）
型番：HBP-ARU-903

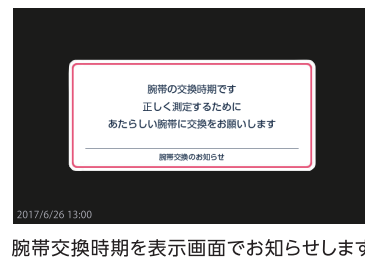

腕帯交換時期を表示画面でお知らせします

多様な方式で測定データの通信が可能

USBケーブル、Bluetooth®、有線・無線LANでデータ通信可能。

健太郎® HBP-9031Cとパソコンなど端末機器に接続すると直接



※システムにあわせて端末のソフトウェアを準備する必要があります。 ※ご使用のシステムとの連携は各システムベンダー様へお問い合わせください。

正しい測定姿勢に導く「正確測定サポート機能」

◎ 正確測定Navi

腕の挿入を検知して、画面ガイダンスと音声ガイドで
正しい姿勢にナビゲート。



◎ 可動式腕帯

腕帯が可動するため背の高い方も
無理なく正しい姿勢で測定できます。




その他豊富な機能を搭載

◎ 腕の細い人から太い人
（腕周17-42cm）まで
広範囲に測定

◎ 左右どちらの腕でも測定可能

◎ オリジナル
メッセージ
画面で
情報発信

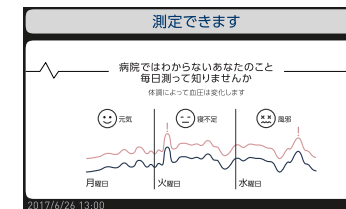

キオスク血圧測定のおすすめ

まずは“知る”ことから始めよう、あなたの血圧

“キオスク”は街角の小さな店などの場所のこと。そのような
場所で行われる血圧測定を“キオスク血圧測定”といいます。
スポーツジムや自治体、公共施設や職場、医療施設の待合室、
健診・検診会場、介護施設、災害時の避難所、薬局などにおい
てある自動血圧計で測定してみてください。

※参考 特定非営利活動法人 日本高血圧学会「キオスク測定&血圧朝活のススメ」冊子より



様々な施設の
効率運営を
サポート



くわしくはこちら

