

「近ごろ、なんだか聴こえが悪い」 イヤメイトデジタルは、 そんな方におすすめです。

思いあたることは、ありませんか？

- 小さな声を聴きもらすことがある。
- 会話の最中、よく二度聴きをする。
- テレビの音が大きすぎると言われたことがある。
- 「日比谷」と「渋谷」など、聴き違いをすることがある。



あなたの聴こえはどのレベル？

「聴力の衰え」は、大きく分けると4通りです。
イヤメイトデジタルは軽度の方に適しています。

軽度難聴 小さな話し声が聴きづらい

中度難聴 普通の会話が聴きづらい

高度難聴 大きな声でも聴きづらい

重度難聴 かなり大きな声でも聴きづらい

仕様 ※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

- 販売名：イヤメイトデジタル AK-10シリーズ ●商品型式名：AK-10/AK-15
- 最大音響利得：HFA:17±5dB ●90dB最大出力音圧レベルHFA:101±4dB(ピーク値:108dB以下) ●使用電池：空気電池PR-41
- 電池寿命：連続使用で約155時間 ●本体質量：約1.8g(電池含む)
- 外形寸法：幅13.5×高さ24.9×奥行き10.3mm

	個装箱	サブカートン	マスターカートン
寸法(幅×高さ×奥行き) 質量	124×36×84mm (約72g)	—	360×270×205mm (約3.25kg) 40台/ケース

※上記の数値はJIS-C5512:2015の2cm²カプラにより測定、表示してあります。



別売品

品名	型式	品名	型式
イヤチップ(S)	AK-DCP-S	電池ホルダー	AK-10-BAHO
イヤチップ(M ベント付)	AK-DCP-M	空気電池 PR41	AK-BATT-PR41
イヤチップ(L ベント付)	AK-DCP-L		

※必ず専用のイヤチップをお求めください。

次のような方は、医師とご相談のうえ、ご使用ください。

- 耳の手術を受けたことのある方。●耳だれのある方。●耳あかの多い方。●急性または慢性のめまいのある方。●外耳道に湿疹、痛みまたは不快感のある方。
- 耳の治療を受けている方。●過去90日以内に突発性または進行性の聴力低下があった方。●過去90日以内に左右どちらかの耳に聴力低下があった方。

お問い合わせ、ご用命は…

製品のお問い合わせ、別売品や消耗品のご注文、修理のご依頼は

オムロン ヘルスケア お客様サポート
<https://www.healthcare.omron.co.jp/support/>

オムロン お客様サービスセンター
TEL 0120-30-6606(通話料無料)
受付時間 9:00~19:00(祝日を除く月~金)
〒515-8503 三重県松阪市久保町1855-370

製造販売元 **オムロンヘルスケア株式会社**

〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地 <https://www.healthcare.omron.co.jp/>

DA272

©OMRON HEALTHCARE Co.,Ltd. 2016. All Rights Reserved.

オムロン イヤメイトデジタル AK-10/AK-15 デジタル式補聴器



軽度難聴者用

イヤメイトデジタルは小さな話し声が聴き取りにくいなど、耳の少し遠い方のための聴力を補う機器です。
(中・高度難聴の方には向きません)

All for Healthcare

デジタルだから、
「電話」も快適、
「大きな音」もきれいに聴こえる。

イヤメイトデジタル デジタル式補聴器 軽度難聴者用



AK-10
メーカー希望小売価格
40,000円(非課税)

医療機器認証番号
228AABZX00056000



AK-15
メーカー希望小売価格
50,000円(非課税)

医療機器認証番号
228AABZX00056000

ハウリング
キャンセル機能

ハウリング
キャンセル機能

大音量クリア
機能

大音量クリア
機能

ノイズ
キャンセル機能

ノンリニア機能

※一部のスマートフォン・携帯電話やコードレス電話を使用する際、補聴器から雑音が聞こえることがあります。故障ではありません。

電話中のピーピー音をカット、通話も快適。

①ハウリングキャンセル機能

受話器を当てると起こるピーピー音をカット、固定電話もスマートフォン・携帯電話も補聴器をつけたまま快適にご使用いただけます。



●ハウリングキャンセル機能とは？

補聴器をつけたまま電話をしても、ピーピー音がしにくい。
〈イヤメイトデジタル〉 〈アナログ補聴器〉

会話



会話



※正しく装着するとハウリングを抑える効果がありますが、ハウリングが完全に無くなるわけではありません。

大音量の音楽もきれいな音色。

②大音量クリア機能

アナログ補聴器では大音量の音楽などで、ひずみ(音割れ)が発生してしまう問題がありました。イヤメイトデジタルは、一定以上の大音量を適正な出力レベルに調整する「大音量クリア機能」を搭載、ひずみにくい鮮明な聴こえを実現しました。




●大音量クリア機能とは？

大音量の音楽もひずみにくく、きれいな音色で聴こえます。

〈イヤメイトデジタル〉

〈アナログ補聴器〉

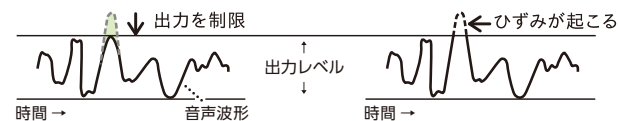

………… AK-15のみの快適機能 ……………

生活の中の定常騒音を効果的に低減。

小さな音はよりハッキリ、大きな音はより優しく調整。


③ノイズキャンセル機能

エアコンや換気扇などの一定レベルで持続する動作音はノイズと判断し増幅を抑制します。

④ノンリニア機能

聞き取りにくい小さな音は大きく増幅、掃除機やドライヤーなどの大きな音は、増幅を抑制します。

充実機能で毎日を快適サポート

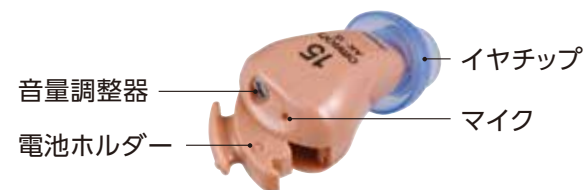

●目立たず疲れにくい超小型

超小型で重さわずか1.8g。長時間使用も疲れません。装着も目立たない肌色の耳あな型タイプです。



●音量調整もカンタン

聴力に合わせて、聴こえやすい音量に調整できます。

●スイッチONの簡単操作

電池ホルダーを閉めると電源が入ります。



●耳あかの侵入を防ぐ フィルター付きイヤチップ

付属品

ブラシ付ドライバー 携帯ケース

本体取付け済み

お試し用電池
(1個)



- イヤチップ(S・M・L各1個) ※M・Lのみベント付き(ベントとは小さな穴のことです。ベント付は密閉感を減らして自然の聴こえに近づけます。)
- 電池ホルダー(2個、予備含む) ※1個は本体に取り付け済み
- 取扱説明書(品質保証書付き) ●お助けガイド
- 医療機器添付文書



左右どちらの耳でもご使用いただけます。
より良い聴こえのために、両耳への装着をおすすめします。